

# SEQUENCE PRO – Diagnostic PCR au chevet du patient



## SEQUENCE PRO™

Réalisez vos analyses en continu dans votre centre médical

- ✓ Extracteur d'ADN/ARN et PCR en temps réel sur une seule machine
- ✓ Utilisation flexible grâce à l'introduction d'échantillons à tout moment
- ✓ Outil de paillasse compact, il réduit le temps de diagnostic et améliore la prise de décision rapide avec traçabilité et fiabilité des résultats

**SEQUENCE PRO™** fonctionne par saisie en temps réel.

Vous pouvez désormais fournir des informations cliniques avec le plus haut niveau de précision.

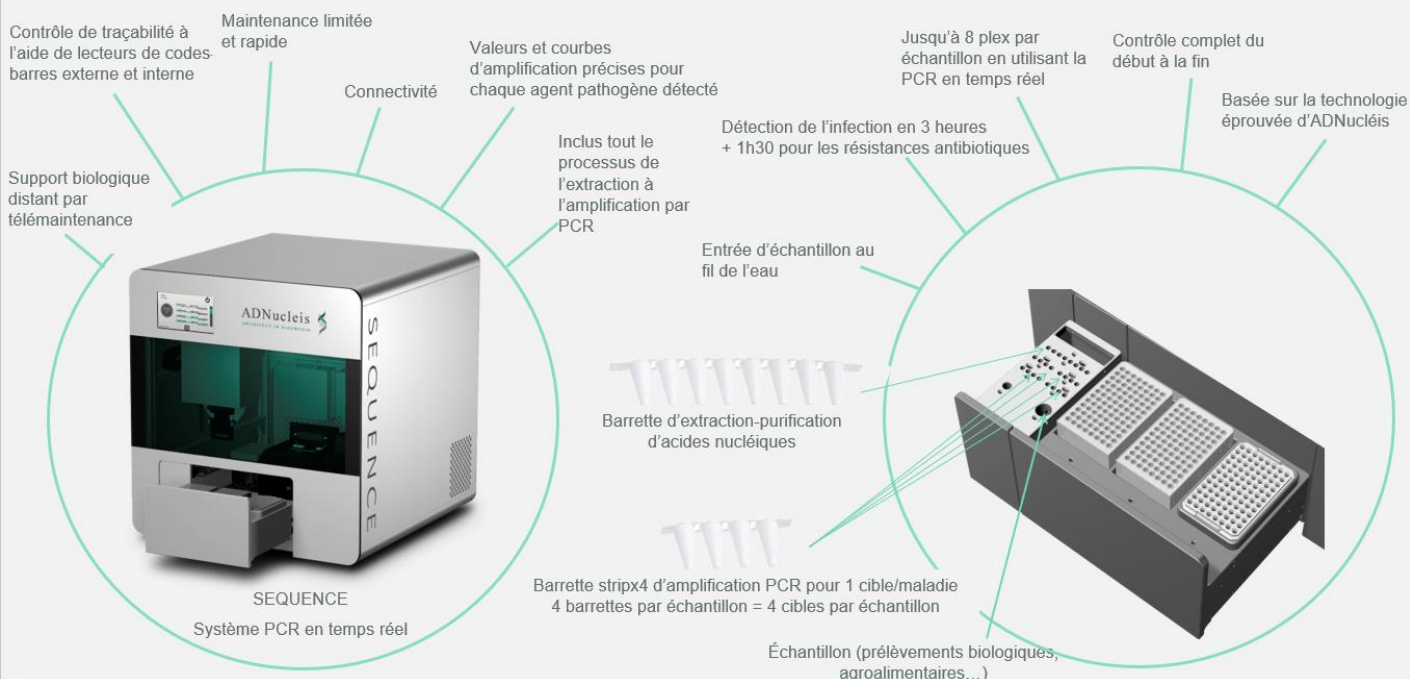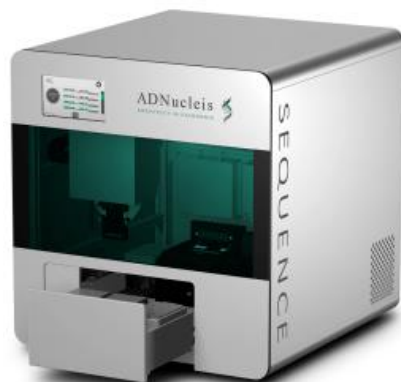

### Spécifications :

Interface

Accessible depuis tablette, smartphone et PC (analyses en cours, résultats, programmation d'analyses ...)

Kit PCR

Accès différencié pour les utilisateurs avec surveillance des droits

Jusqu'à 16 cibles par insertion d'échantillon (vendues par barrettes contenant 4 cibles chacune)

Large gamme de kits de PCR en temps réel dont le COVID-19 avec une forte sensibilité (3 séquences ciblées), la grippe, le virus respiratoire syncytial (RSV), Bordetella, ...

Pour plus d'information

contactez-nous au : [support@adnucleis.com](mailto:support@adnucleis.com) / +33(0)972 636 927 / [www.adnucleis.com](http://www.adnucleis.com)

**ADNucleis**  
Architect in Diagnosis

# SEQUENCE PRO – Diagnostic PCR au chevet du patient

## SEQUENCE PRO™

Flux et délais d'extraction-purification et de PCR en temps réel	Jusqu'à 36 échantillons / jour (jusqu'à 6 échantillons toutes les 90 minutes) Premiers résultats en 2h, débit continu après <b>2 mins</b> Temps d'analyse des agents pathogènes / échantillon = 3h En option : analyse supplémentaire résistance aux antibiotiques = + 1h30
Format d'échange de données	Text (.txt), Excel (.csv, .xlsx), LibreOffice Calc (.ods)
Détails	Mouvements du bras en X, Y et Z avec une précision < 0.1 mm
Technologie de pipetage	Installation de votre propre pipette calibrée En option
Connectivité	USB, WiFi, Ethernet
Maintenance	Maintenance préventive annuelle. L'étalonnage des pipettes peut être réalisé par AD Nucleis sur demande ou par le fabricant de la pipette montée.
Taille – Poids	60 cm * 60 cm * 60 cm – 35 Kg
Puissance requise	110 – 250 V / 50 – 60 Hz
Déclaration de conformité CE	EC 61010-1: 2001 61010-2-81: 2001 / A1: 2003 61010-2-010: 2003 62304: 2006 62366-1: 2015

### Information de commande :

#### Produit

SEQUENCE PRO™ real time PCR system  
Barrette d'Extraction purification (pour 1 échantillon)  
Barrette d'Amplification PCR (4 cibles par barrette)  
Plaque Deepwell 96 puits  
Boite de 96 cônes

#### Code produit

HQS\_SEQ  
HQS\_EP\_SEQ  
Veuillez demander la liste  
HQS\_DW\_SEQ  
HQS\_TIPS\_SEQ



Pour plus d'information

contactez-nous au : [support@adnucleis.com](mailto:support@adnucleis.com) / +33(0)972 636 927 / [www.adnucleis.com](http://www.adnucleis.com)